



# MICOTOSSINE

Linea Controllo







**T2/HT2 SELECT-OR**

**COD. RK-IAC6004**

*Colonne di immunoaffinità per la purificazione delle tossine T2 e HT2 da matrici alimentari.*

*Le colonne di immunoaffinità **T2/HT2 SELECT-OR** sono di facile utilizzo e progettate per una rapida e semplice purificazione di delle **tossine T2 e HT2** da cereali (es. mais, avena e segale) e prodotti derivati da cereali e garantiscono un'elevata precisione.*

*Le tossine T2 e HT2 estratte con solvente vengono purificate dalle colonne di immunoaffinità dalle quali saranno poi eluite con acqua adatta alla lettura diretta in HPLC.*


-  **RAPIDO:** *clean-up in 20 minuti*
-  **AFFIDABILE:** *anticorpi monoclonali contro le tossine T2/HT2*
-  **PRECISIONE:** *Recupero > 95%*
-  **DUREVOLE:** *shelf life 12 mesi ddp*
-  **VERSATILE:** *applicabile a matrici complesse*
-  **In accordo Dir. CE 2002/26**

**OR SELL CONTROLLA GLI ALIMENTI**




OR SELL s.r.l.  
Via Lametta, 146  
41010 Limidi di Soliera  
(MO)

Tel. +39 059 652504  
Fax +39 059 9782208  
www.orsell.it  
kits@orsell.it

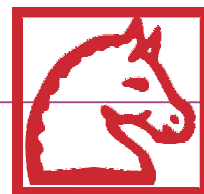

## Procedura di clean up con colonne di immunoaffinità

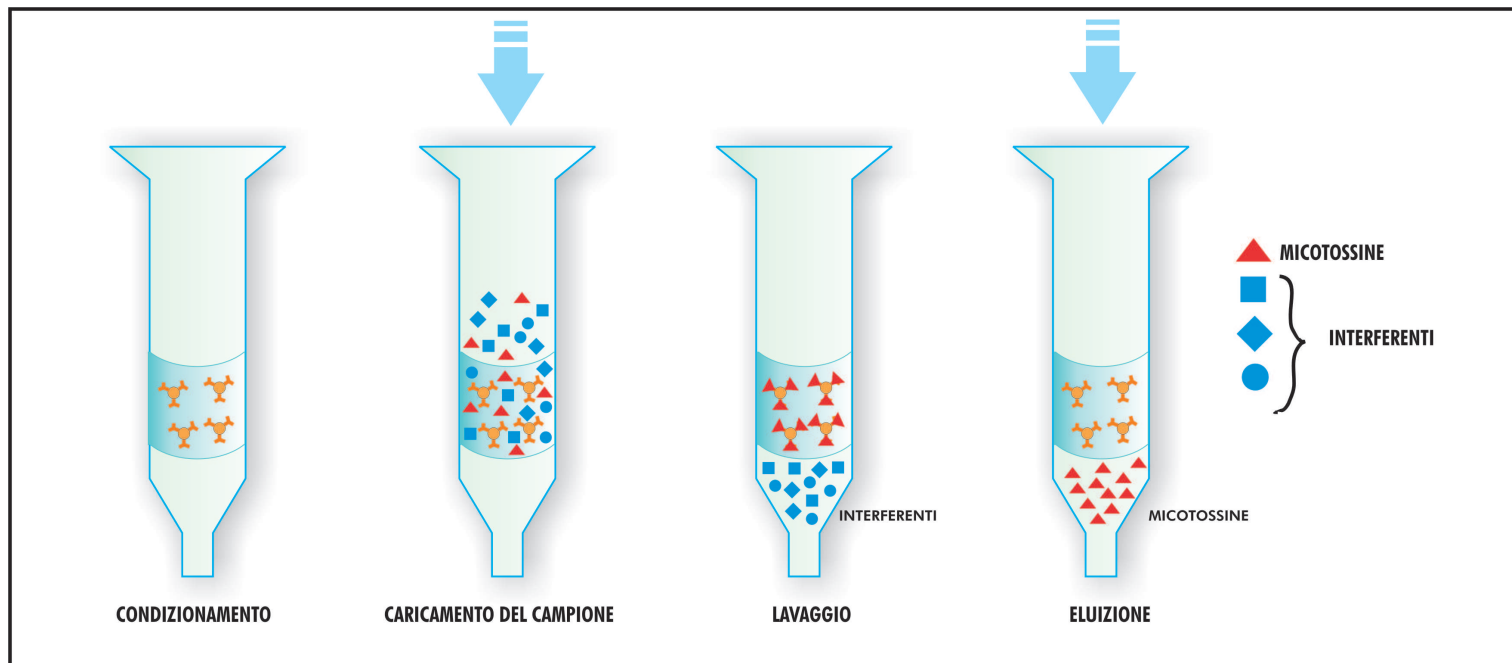

### T2/HT2 SELECT-OR - Colonne di immunoaffinità per le Tossine T2 e HT2 Codice: RK-IAC6004

*Caratteristiche: Anticorpi monoclonali contro T2/HT2*

*Confezione: 25 colonne di immunoaffinità*

*Flusso: 3 ml/min*

*Volume del gel in colonna: 0.3 ml*

*Conservazione: 2- 8°C, non congelare*

#### Bibliografia:

- CAST (Council for Agricultural Science and Technology) -report, *Mycotoxins Risks in Plant, Animal, and Human Systems*, Jan. 2003
- EC-Directive EC/401/2006, February 23rd 2006, EC-Directive EC/178/2010, March 2nd 2010, *laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs*.
- Tauchmann, F., et al; *Alimenta* 11, 85 (1972): *protective measures*

OR SELL CONTROLLA GLI ALIMENTI



OR SELL s.r.l.  
Via Lametta, 146  
41010 Limidi di Soliera  
(MO)

Tel. +39 059 652504  
Fax +39 059 9782208  
www.orsell.it  
kits@orsell.it

